


スチームクリーナー
STEAM CLEANER

三銃士II

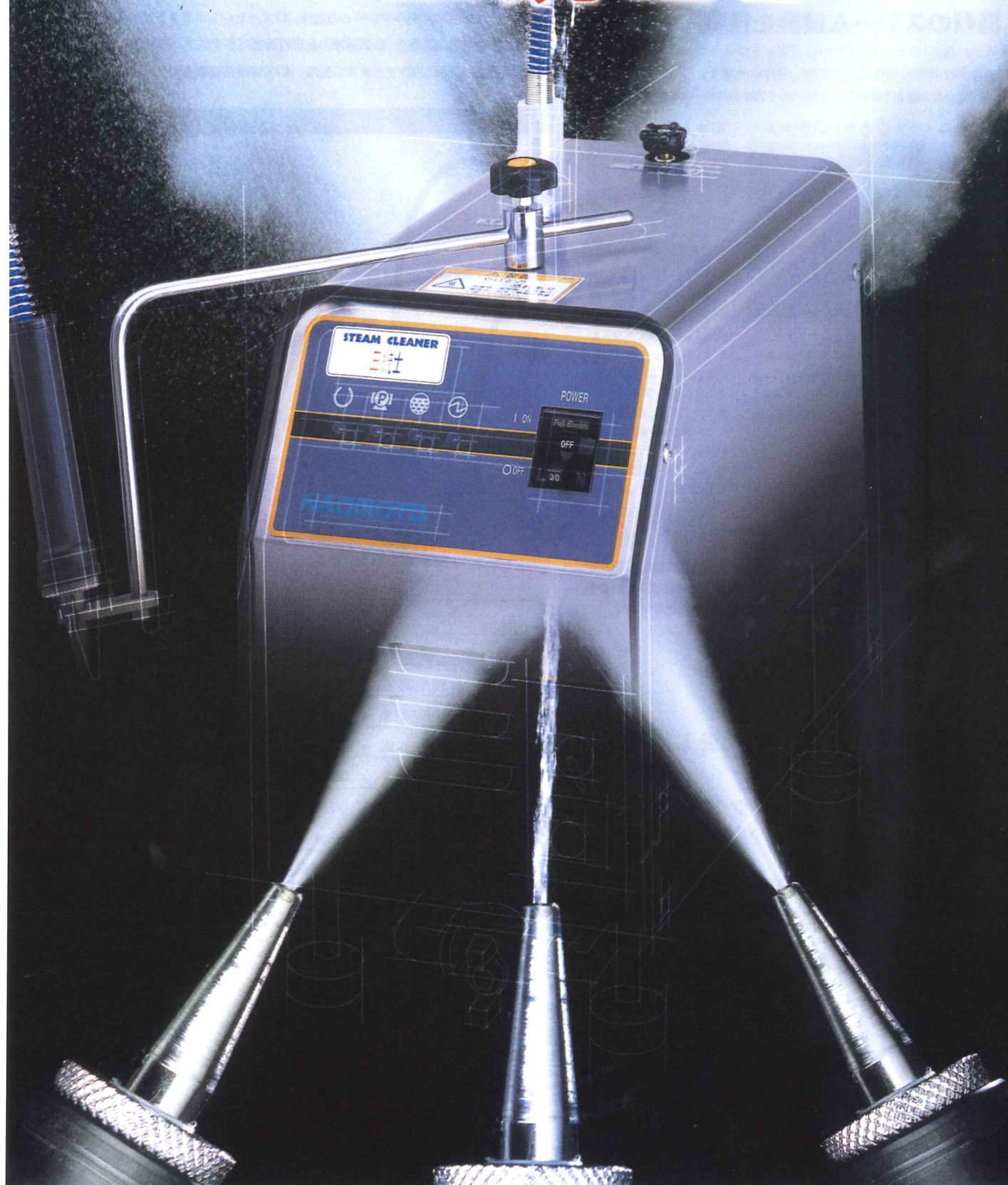

STEAM CLEANER スチームクリーナー 三銃士II

簡易圧力容器


「ドライスチーム」、「ウェットスチーム」、「ホットウォーター」を用途によって使い分けられる、全自動スチーム洗浄機。

特 徴

①3種類のスチーム機能を搭載


「ドライスチーム」、「ウェットスチーム」、「ホットウォーター」の3機能が内蔵されており、それぞれの用途によって使い分けられます。
(個々に独立した供給回路を形成しているため、全く異なるスチーム機能を実現しました)

ドライスチーム

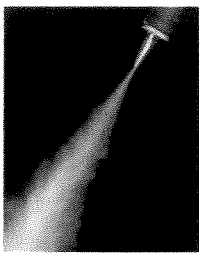


デンチャー・歯冠修復ワックス前の石膏模型に、適度な蒸気圧のドライ・スチームを用いる事で支台歯の石膏面荒れを防ぎ、石膏面にダメージを与えません。洗浄処理が速く、きれいに行えます。

ウェットスチーム

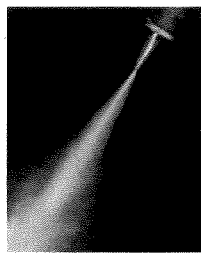

力強いウェットスチームを使用することで、補綴物完成後の石膏模型に付着したワックス、汚れ、メタルなどを短時間に洗浄処理できます。

ホットウォーター

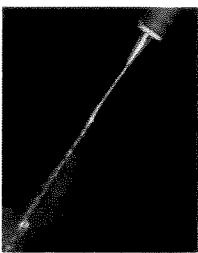

前蟻着と後蟻着で使用したステッキ・ワックス(融点の高いワックス)を使用することにより、容易に洗い流せます。また、歯間乳頭部ワックス、人口歯ワックスの洗浄や、デンチャーに付着したワックスの洗浄処理にも優れています。

②スチームの量と圧力が安定

制御の応答性に優れたスチーム圧を直接コントロール方式で採用しています。また、タンク内部で直接加熱する先進的な方式を採用していますので、熱効率100%のスチーム量と、安定した圧力のスチーム噴射を行うことができます。

③起動時間が早い

約10分で使用可能です。

④イオン交換樹脂で軟水処理をしています


⑤ペダルはチャイルド・ロック方式を採用

チャイルド・ロック方式の採用で、フット・スイッチを踏んでも作動しないため安全です。


用 途

- ◎ポーセレン用のメタルフレームの洗浄
- ◎ポーセレンクラウンの表面洗浄
- ◎補綴物の研磨の洗浄
- ◎鑄造後の埋没材除去(クリスタブライト)
- ◎各種模型の洗浄
- ◎ワックスの洗浄
- ◎各種機具類の洗浄


仕 様

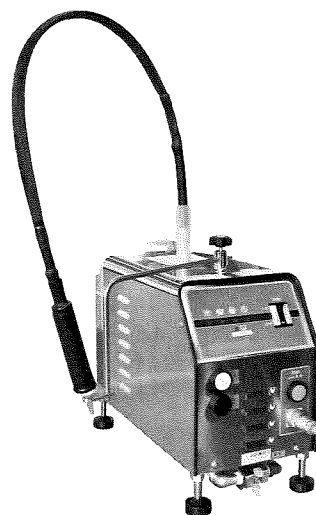

Steam Cleaner SC-100N
価格 ¥288,000(税別)

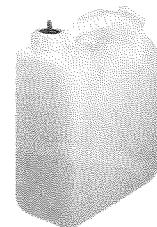

水タンク

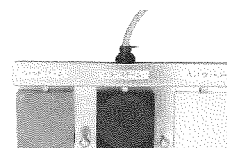

フットスイッチ

型 式	SC-100N
消 費 電 力	100V 1500W
スチーム発生方式	セラミックヒーター
ドライウェットの切換	スイッチまたはフットスイッチ
缶 体 容 量	2.2L
水 タ ン ク	5L (外部)
本 体 寸 法	W200×D340×H265 (mm)
本 体 重 量	10kg
備 考	イオン交換樹脂内蔵

※製品は改良のため、予告なしに仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。

製造元 **直本工業株式会社**

〒543-0031 大阪市天王寺区石ヶ辻町 19-8
TEL.(06)6775-2500 FAX.(06)6775-2510

発売元 **内外歯材株式会社**

大 阪 本 社 : 〒543-0062 大阪市天王寺区逢阪2丁目3番10号
TEL.(06)6771-5553(代) FAX.(06)6779-7518
名古屋営業所 : 〒464-0075 名古屋市千種区内山1丁目2番6号
TEL.(052)741-7011(代) FAX.(052)741-7014

販売店名